

Geratherm Ergostik

Geratherm®
Respiratory

**Intuïtief ademgasanalyse systeem,
compatibel met de meest voorkomende
ECG-apparatuur.**


- Volledige opstelling of als uitbreiding van uw huidige inspannings-ECG. (GE, Mortara enz.)
- Automatische AT/RCP-detectie
- Conform ATS/ERS-richtlijnen
- Nauwkeurige pneumotachograaf met zeer lage weerstand, ongevoelig voor vocht- of condensvorming




Technische eigenschappen

Testen	CPET, VO ₂ max, Spirometrie, Flow-Volume, MVV
Omgevingsfactoren	ATPS/BTPS-correctie en CO ₂ -compensatiemodule
Flow sensor	Pneumotachograaf met variabel membraan (Ergoflow) ± 16 L/s
O ₂	Elektrochemische cel 1-100% - Accuraatheid ± 0,1 vol% (13-21%) / (22-100%)
CO ₂	Infrarood absorptie 0-13% - Accuraatheid ± 0,1 vol% (2,5-7,5%)
Data Management	Koppeling naar EPD via HL7 of GDT

Geratherm Ergostik

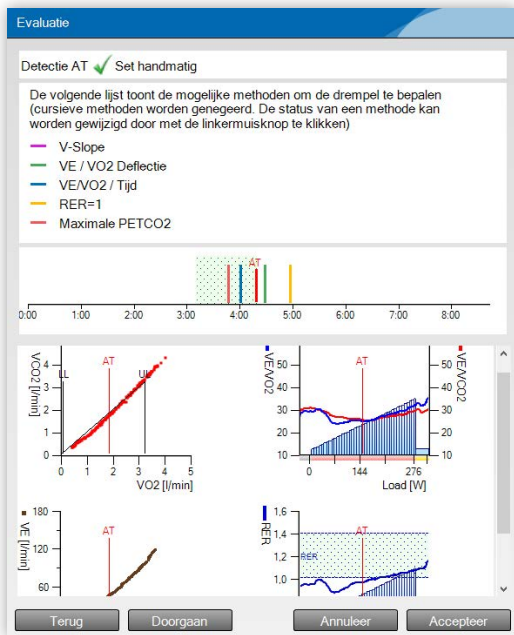

Met onze zeer **gebruiksvriendelijke wizard functie** bepaalt u met groot gemak de maximale belasting, de AT en de RCP op basis van diverse modellen (V-Slope, RER=1 enz) en gebruikt u de Wasserman-beoordeling voor een eerste interpretatie.

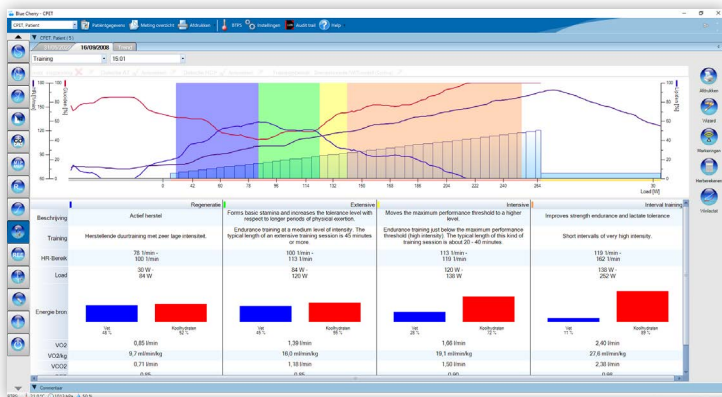

Optioneel met trainingsplanner, voor het aanbieden van trainingsprogramma's op ieder niveau. Verschaft een zeer duidelijk beeld van de energieconsumptie met bijbehorende HR/Load en VO2.

Waarom Accuramed?

- 1 vast contactpersoon
- Lokale service van a tot z onder 1 dak
- Heldere analyse van uw behoeften
- Gedetailleerde prijsvoorstellen
- Levering, installatie, training
- Aftersales advies en ondersteuning
- Technische support en onderhoud
- Voordelige tarieven
- Oplossingen op maat over verschillende leveranciers heen
- Eigen hard- en software ontwikkelingen
- Betrouwbare partner met 20+ jaar ervaring